


Guía Rápida: Crear y Añadir un Valor de Referencia

Cómo agregar rangos de referencia a una prueba, evitando que se crucen entre sí.


Paso 1 Ubica la prueba

Ve a Ajustes → Mantenedores → Prestaciones y activa el check Mostrar Filtros. Busca el examen al que deseas agregar el valor de referencia, haz clic en la tuerca y localiza la prueba correspondiente.

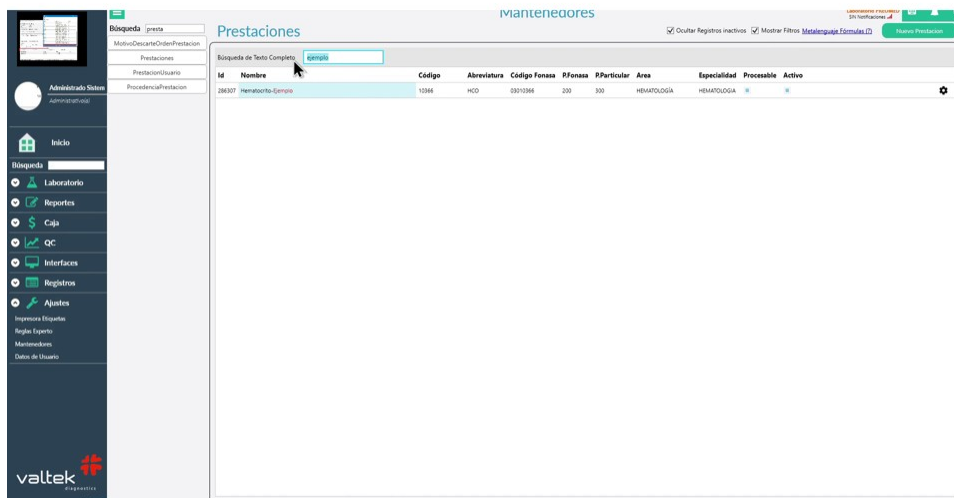

Paso 2 Agrega el rango

Presiona Configurar Prueba y luego Agregar Rango. Completa el formulario: Descripción (el título), Muestra, Unidad de Medida, Método, Grupo Fisiológico (si corresponde), Sexo (si distingues por género), y Edad Desde / Edad Hasta. El campo Texto es lo que se mostrará en el informe, y Bajo / Alto es el rango que considerará el sistema. Presiona Grabar.

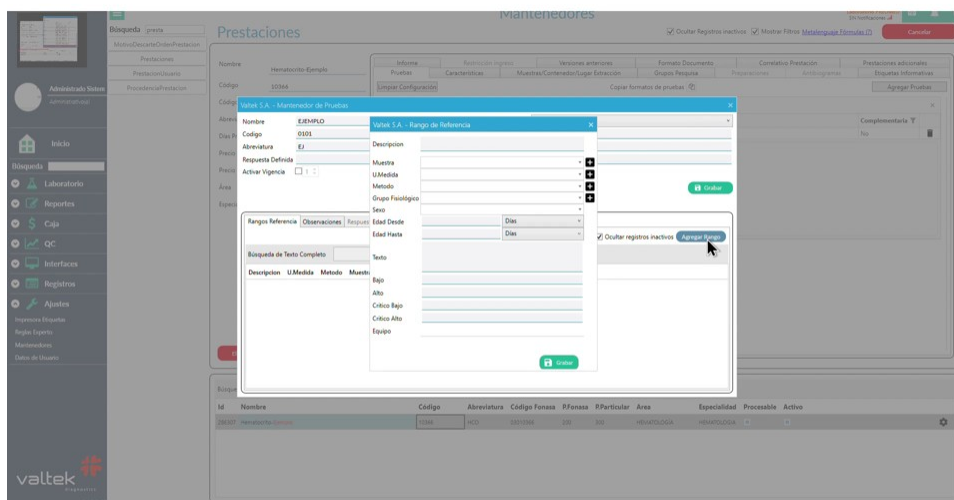

Paso 3 Agrega el siguiente rango sin que se crucen

Para el próximo valor de referencia, cambia el título y ajusta la Edad Desde para que comience un día después de la Edad Hasta del rango anterior. Así evitas que los rangos se superpongan y puedes seguir agregando valores de referencia sin problemas.

The screenshot displays the Valtek Prestaciones software interface. A modal window titled "Valtek S.A. - Rango de Referencia" is open, allowing for the configuration of a reference range. The window includes the following fields and options:

- Description:** NIÑOS 2
- Units:** mg/dL
- Method:** Oxígeno peroxidasa
- Age Range:** 2.0 - 3.0
- Buttons:** Guardar (Save), Cancelar (Cancel)

The background interface shows a sidebar menu with options like "Inicio", "Laboratorio", "Registros", "Caja", "QC", "Interfaces", "Registros", "Ajustes", "Impresión", "Reglas", "Mantenimiento", and "Datos de Usuario". The main area displays a table of test results with columns for "Id", "Nombre", "Código", "Abreviatura", "Código Fomasa", "P.Fomasa", "P.Particular", "Area", "Especialidad", "Procesable", and "Activo".

Tip: antes de grabar un nuevo rango, revisa siempre el “hasta” del rango anterior — la edad “desde” del nuevo debe comenzar justo un día después.